

E-Eye

PROTOKOLL
zur Stimulierung der
Meibomschen Drüsen



ESW
Vision

ERSTER HERSTELLER VON LICHT-HIGH-TECH-PRODUKTEN IN FRANKREICH

DAS PROTOKOLL FÜR DIE BEHANDLUNG MIT DEM

VOR DER BEHANDLUNGSSITZUNG:



- Erläutern Sie dem Patienten die Technologie und das Prinzip der Stimulation der Meibomschen Drüsen.
- Erforschen Sie eventuell vorliegende Gegenindikationen gegen die Anwendung von Pulslicht.
- Informieren Sie den Patienten über den Preis pro Sitzung und andere Pauschalangebote.
- Lassen Sie den Patienten die aufgeklärte Einwilligung aufmerksam lesen ①.
- Lassen Sie den Patienten die aufgeklärte Einwilligung ausfüllen und unterschreiben ②.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass er zu der Behandlungssitzung erscheint, ohne vorher Kosmetika auf die Haut aufzutragen.

ZUM BEHANDLUNGSTERMIN:

- Vergewissern Sie sich, dass für den Patienten keine Gegenindikationen gegen die Pulslicht-Behandlung vorliegen [insbesondere keine parallel laufende andere Behandlung].
- Vergewissern Sie sich, dass tatsächlich kein Kosmetikmittel auf die Haut aufgetragen wurde; falls doch, so muss dieses mit unparfümiertem mizellarem Reinigungswasser entfernt werden ③.
- Decken Sie eventuell vorhandene Leberflecke und andere braune Flecken mit Hilfe der Patches ab.
- Legen Sie dem Patienten die Schutzmaske *Eye mask* an und kontrollieren Sie deren korrekten Sitz ④.
- **Tragen Sie das Gel in reichlicher Menge (mindestens 1 cm dick) auf; achten Sie darauf, dass nichts davon unter die *Eye mask* gelangt ⑤.**
- Stellen Sie die Leistung der Lichtimpulse im Lauf der Sitzungen nach und nach in Abhängigkeit vom subjektiven Empfinden des Patienten sowie von den erzielten Ergebnissen ein ⑥.
- Entriegeln Sie die Sicherheitsvorrichtungen ⑦.
- Legen Sie Ihre Schutzbrille *mask* an ⑧.
- Setzen Sie 5 Flashes (Lichtimpulse) auf der linken Gesichtshälfte ⑨, beginnend vom inneren Augenwinkel und endend im Schläfenbereich ⑩.
- Wiederholen Sie die Behandlung auf der rechten Gesichtshälfte ⑪.
- Schalten Sie am Ende der Behandlungssitzung das Gerät aus.
- Entfernen Sie das Gel vom Gesicht und spülen Sie die Haut ab ⑫.

NACH DER BEHANDLUNGSSITZUNG:

- Informieren Sie den Patienten darüber, dass Hautrötungen auftreten können.
- Weisen Sie den Patienten streng an, während des gesamten Zyklus der Behandlungssitzungen keine anderen Eingriffe auf den mit Pulslicht behandelten Hautarealen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.
- Planen Sie eine zweite Sitzung zwei Wochen später (Tag 0 +15) und danach die übrigen Sitzungen an den Tagen: Tag 0 +45 und Tag 0+75 ein.
- Empfehlen Sie dem Patienten für den Fall, dass die mit Pulslicht behandelten Hautareale einer intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, die Verwendung eines Sonnenschutzmittels.

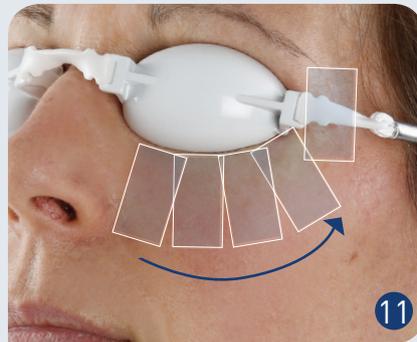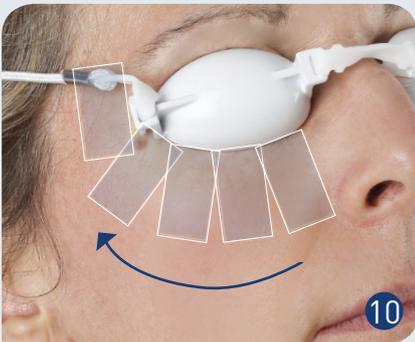

E-EYE: eine französische Innovation



www.esw-vision.com

ESW
Vision

Ref. : M029DE002C08A

Das von E-Swin [France] entwickelte und hergestellte E-EYE ist ein Medizingerät der Klasse IIb mit durch die Benannte Stelle 04197 zuerkannter CE-Kennzeichnung. Es dient zur Behandlung der Meibomitis. Bitte halten Sie die Bedingungen der Benutzungsanleitung ein.

CE 0197