

E•Eye

PROTOKOLL
zur Stimulierung der
Meibomschen Drüsen



ESW
Vision

ERSTER HERSTELLER VON LICHT-HIGH-TECH-PRODUKTEN IN FRANKREICH

DAS PROTOKOLL FÜR DIE BEHANDLUNG MIT DEM E•EYE

VOR DER BEHANDLUNGSSITZUNG:

- Erläutern Sie dem Patienten die Technologie und das Prinzip der Stimulation der Meibomschen Drüsen.
- Erforschen Sie eventuell vorliegende Gegenindikationen gegen die Anwendung von Pulslicht.
- Informieren Sie den Patienten über den Preis pro Sitzung und andere Pauschalangebote.
- Lassen Sie den Patienten die aufgeklärte Einwilligung aufmerksam lesen ①.
- Lassen Sie den Patienten die aufgeklärte Einwilligung ausfüllen und unterschreiben ②.
- Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass er zu der Behandlungssitzung erscheint, ohne vorher Kosmetika auf die Haut aufzutragen.

ZUM BEHANDLUNGSTERMIN:

- Vergewissern Sie sich, dass für den Patienten keine Gegenindikationen gegen die Pulslicht-Behandlung vorliegen [insbesondere keine parallel laufende andere Behandlung].
- Vergewissern Sie sich, dass tatsächlich kein Kosmetikmittel auf die Haut aufgetragen wurde; falls doch, so muss dieses mit unparfümiertem mizellarem Reinigungswasser entfernt werden ③.
- Decken Sie eventuell vorhandene Leberflecke und andere braune Flecken mit Hilfe der Patches ab.
- Legen Sie dem Patienten die Schutzmaske *Eye mask* an und kontrollieren Sie deren korrekten Sitz ④.
- **Tragen Sie das Gel in reichlicher Menge (mindestens 1 cm dick) auf; achten Sie darauf, dass nichts davon unter die *Eye mask* gelangt ⑤.**
- Stellen Sie die Leistung der Lichtimpulse im Lauf der Sitzungen nach und nach in Abhängigkeit vom subjektiven Empfinden des Patienten sowie von den erzielten Ergebnissen ein ⑥.
- Entriegeln Sie die Sicherheitsvorrichtungen ⑦.
- Legen Sie Ihre Schutzbrille *mask* an ⑧.
- Setzen Sie 5 Flashes (Lichtimpulse) auf der linken Gesichtshälfte ⑨, beginnend vom inneren Augenwinkel und endend im Schläfenbereich ⑩.
- Wiederholen Sie die Behandlung auf der rechten Gesichtshälfte ⑪.
- Schalten Sie am Ende der Behandlungssitzung das Gerät aus.
- Entfernen Sie das Gel vom Gesicht und spülen Sie die Haut ab ⑫.



NACH DER BEHANDLUNGSSITZUNG:

Informieren Sie den Patienten darüber, dass Hautrötungen auftreten können.

Weisen Sie den Patienten streng an, während des gesamten Zyklus der Behandlungssitzungen keine anderen Eingriffe auf den mit Pulslicht behandelten Hautarealen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.

Planen Sie eine zweite Sitzung zwei Wochen später (Tag 0 +15) und danach die übrigen Sitzungen an den Tagen: Tag 0 +45 und Tag 0+75 ein.

Empfehlen Sie dem Patienten für den Fall, dass die mit Pulslicht behandelten Hautareale einer intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, die Verwendung eines Sonnenschutzmittels.

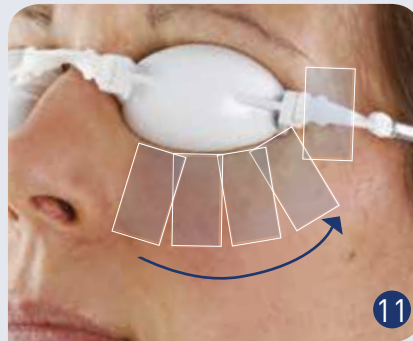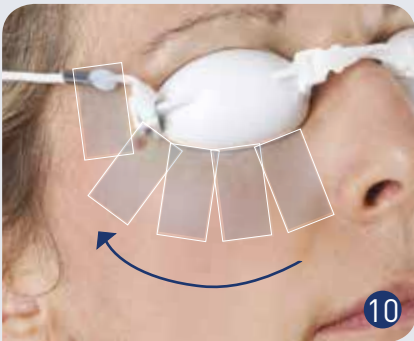

E-EYE: eine französische Innovation



www.esw-vision.com

ESW
Vision

Ref. : M029DE002B08A
Das von E-Swin [France] entwickelte und hergestellte E-EYE ist ein Medizingerät der Klasse IIb mit durch die Benannte Stelle 0499
zuerkannter CE-Kennzeichnung. Es dient zur Behandlung der Meibomit. Bitte halten Sie die Bedingungen der Benutzungsanleitung ein.

CE 0499