

**Die Augen  
deiner Kunden  
sind kostbar.  
Schau auf sie!**



[schauaufdeineaugen.com](http://schauaufdeineaugen.com)

Copyright 2019 by ESW Vision. All rights reserved. tearstim® is a registered trademark by E-Swin.  
Ref. Nr. M536DE003A

# Schau auf deine Augen.

Der Augen-Service vom Optiker:  
Macht Augen fit und beugt  
Problemen vor.

**tear  
stim**

# Das Syndrom Trockenes Auge

**Viele kennen das Problem: Die Augen brennen, kratzen und jucken, sind müde und gerötet oder lassen sich am Morgen kaum öffnen.**

Das Trockene Auge (Sicca-Syndrom) ist ein Problem, das bereits bis zu 20 % der Bevölkerung betrifft. Die Beschwerden sind vielfältig und werden durch die Belastungen des modernen Augenlebens ausgelöst – die Überfülle an Bildschirmen und digitalen Reizen, künstliches Licht und Luftverschmutzung. All diese Faktoren begünstigen das Trockene Auge und sorgen dafür, dass es als umso belastender empfunden wird.

**Wie kommt es zum Trockenen Auge?**

Das Trockene Auge resultiert aus einer Schädigung des Tränenfilms – genauer gesagt aus einer Funktionsstörung der Meibomschen Drüsen. Diese Drüsen befinden sich an den Rändern des Augenlids und sondern ein fetthaltiges Sekret ab, das die Verdunstung der Tränenflüssigkeit verhindert. Ist diese Fettschicht im Tränenfilm zu wenig oder nicht mehr ausgeprägt, verdunstet die Tränenflüssigkeit zu rasch und das Auge brennt.

# Tränenfilm

Der Tränenfilm hält die Funktion des Auges aufrecht und besteht aus drei Schichten:



## **Fetthaltige Schicht.**

Wird von den Meibomschen Drüsen erzeugt.

## **Wässrige Schicht.**

Wird von den Tränenrüsen produziert.

## **Schleimhautschicht.**


Liegt direkt auf dem Augapfel und wird von der Bindehaut abgesondert.

# Dauerstress für unsere Augen

## Ursachen.


Negative Umwelteinflüsse und die moderne Arbeits- und Lebensweise begünstigen das Trockene Auge.

- Alter
- Displays
- Augenoperationen
- Austrocknung
- Hormonstörungen
- Ernährung
- Medikamente
- Schadstoffe
- Kontaktlinsen

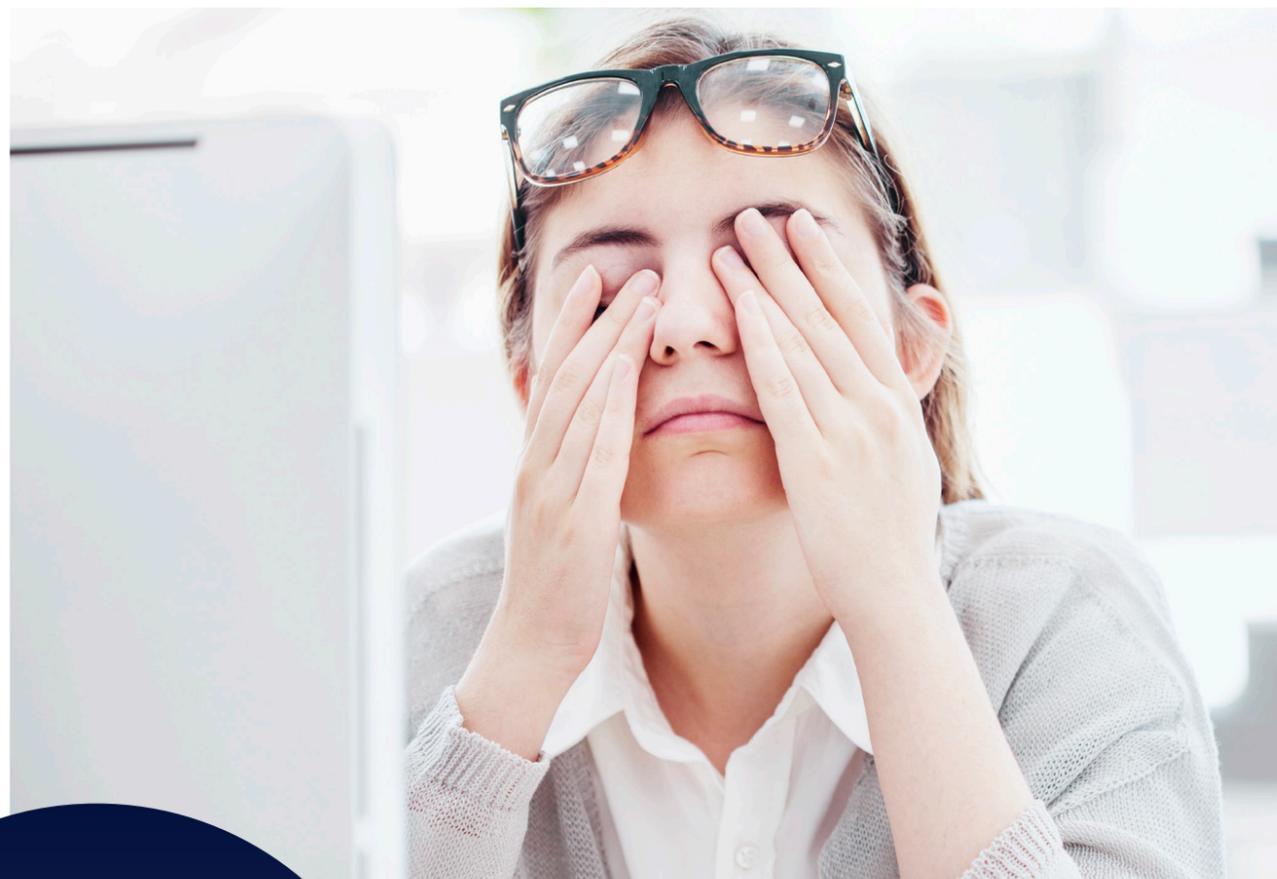

## Probleme.

Rötungen, Ermüdung, verschwommenes Sehen und kratzende Augen sind die ersten Anzeichen des Trockenen Auges. Mit der Zeit kann es zu vielen weiteren Beschwerden und ernsthaften Komplikationen kommen, wie z.B. Infektionen, Gerstenkörnern oder Mikro-Hornhautgeschwüren.

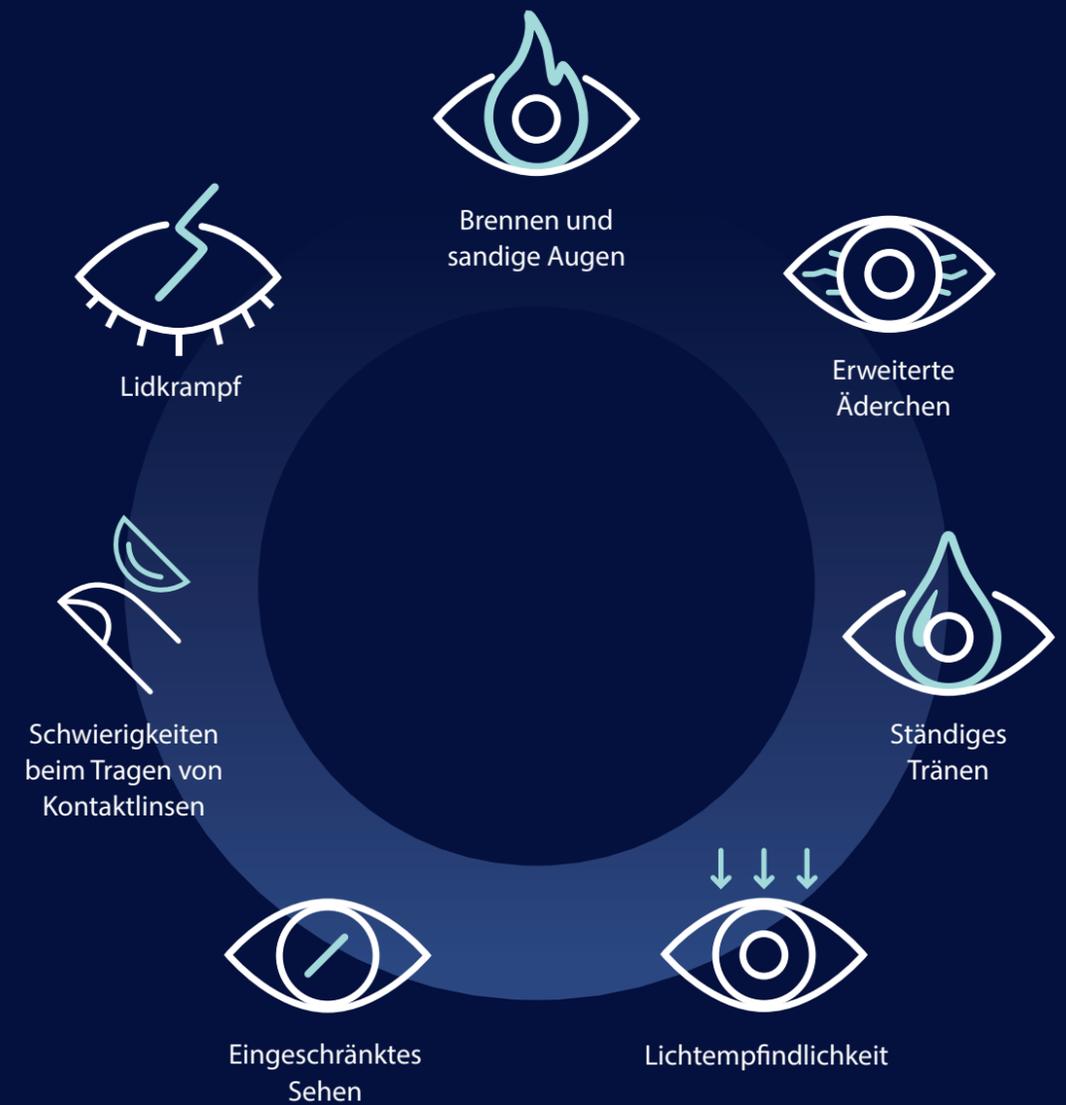



## Der Augen-Service vom Optiker: Macht Augen fit.

Der Augen-Service sorgt dafür, dass die Meibom-Drüsen wieder arbeiten und beseitigt damit die Ursache für das Trockene Auge – im Gegensatz zu Augentropfen, die nur auf eine Milderung der Symptome abzielen.

**Der Effekt wird mit tearstim erzielt – einem Gerät, das auf der innovativen Pulslicht-Technologie (IRPL®) basiert.**

tearstim sendet Lichtpulse auf die Haut rund um das Auge und wirkt auf die Bereiche, wo der Nerv verläuft. Durch die „Belichtung“ des Nervs werden Neurotransmitter freigesetzt, die mit der Meibom-Drüse inter-

agieren und die Sekretion der Drüse anregen. Als Folge erhält die trockene Lipidschicht einen natürlichen Schub an Lipiden, der die Verdunstung der Tränenflüssigkeit reduziert und die Austrocknung des Auges verhindert. Zusätzlich wird die Qualität des Drüsen-Sekrets verbessert und die Lipidschicht des Tränenfilms stabilisiert.

### **Das Ergebnis:**

Die Beschwerden verschwinden und Augen werden wieder fit. Und das bereits ab der ersten Anwendung.



Einfach und  
schnell



Langanhaltend



Wissenschaftlich  
bewiesen:  
90 % zufrieden

# Fitte Augen. Ab dem ersten Augen-Service.

## So läuft der Augen-Service ab:

- Der Service dauert nur ein paar Minuten.
- Der/die Kunde/in ruht bequem in einem Sessel mit nach hinten abgesenkter Lehne. Der Optiker deckt die Augen des/der Kunden/in mit Augenschutzschalen aus Metall ab, die für die ausgesandten Strahlen undurchlässig sind. Auf das untere Augenlid wird ein Hydrogel aufgetragen.
- Es wird eine Serie von Lichtpulsen um das Auge ausgeführt. Diese sind sanft und nicht-invasiv.
- Die Serie wird auf dem Unterlid des anderen Auges in gleicher Weise wiederholt.
- Die Anwendung stellt die normale Tätigkeit der Meibomischen Drüse wieder her, mit sehr schneller Besserung für den/die Kunden/in innerhalb von Stunden nach der Anwendung. Der Effekt hält anfangs einige Tage.
- Insgesamt umfasst der Augen-Service drei bis vier Sitzungen.

# Augen und Licht. Eine gute Kombination.

## Wirksam in 85 % der Fälle.

Der Augen-Service nutzt eine „Leading Technology“: Die innovative Intense Regulated Pulsed Light Technologie (IRPL®), deren Wirksamkeit klinisch mehrfach bestätigt wurde. Die Studien belegen: Eine bedeutende Besserung der von den KundInnen wahrge-

nommen Irritationen, mit einer Zufriedenheit von 90 % nach den ersten zwei Sitzungen. Diese Besserung ist ab der ersten Anwendung spürbar, sie hält zunächst mehrere Tage lang und später von Sitzung zu Sitzung immer länger an.

## Vorbeugung macht Sinn.

Der Augen-Service bekämpft nicht nur die Ursachen des Trockenen Auges, sondern wirkt auch präventiv – er setzt an, noch bevor es überhaupt zu Beschwerden kommt. Dadurch ist die Anwendung auch für Kinder möglich, die durch die starke Nutzung elektronischer Medien in die Risikogruppe fallen. Mit Hilfe des Augen-Service treten die Beschwerden erst gar nicht auf.



# Marketing-Paket



## POS-Marketing

- Kundenflyer
- Augenschein
- Augenpass
- Bring-a-friend Karte
- POS-Display
- Auslagen-Poster A3-A1
- Augen-Service Qualitäts-Siegel
- uvm.



## Presse | Inserat | Mailing

- Presstexte
- Layout Inserat A4
- Direct-Mails



## Online-Medien

- Website-Verlinkung
- Online-Terminvereinbarung
- Newsletter-Design
- Social-Media Postings



# tearstim® Technische Daten



Abmessungen	Maximal 270 x 210 x 380 mm
Gewicht	Maximal 6,4 kg
Größe Verpackung	Maße einschl. Verpackung 612 x 325 x 540 mm
Wellenlänge	> 580–1200 nm
Technologie	IRPL® (Intense Regulated Pulsed Light)
Hersteller-Garantie	2 Jahre
Geräte-Service	wartungsfrei
Installationsart	Tischgerät, mobil einsetzbar

## Das perfekte Duo.



Die innovative Lösung zur Bestimmung der Tränenfilm-Qualität.

Zur langanhaltenden Verbesserung bei geröteten, gereizten und trockenen Augen.